


SS1LA シールド付電極アダプタ

完全シールド付電極インタフェースケーブルは、生体電位信号の高解像度の記録を可能にします。3mのアダプタケーブルは、標準の1.5mm雌型タッチプルーフコネクタに対応します。以下のものと一緒にこのリード線アダプタを使用してください：

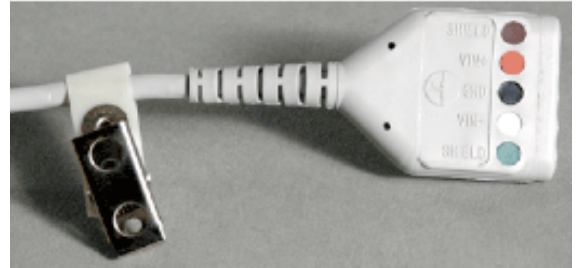

- LEAD120 および EL120 接触ポスト電極
- LEAD110 シリーズおよび
 - EL160 シリーズ再利用可能金皿電極
 - EL250 シリーズ再利用可能 Ag-AgCl 電極
 - EL350 シリーズ棒電極
 - EL450 シリーズ針電極
- LEAD140 シリーズクリップリード線

使い捨て電極を使用するには、LEAD110S-R/W シールド付電極リード線×2 を VIN+および VIN-入力に、LEAD110 非シールドリード線×1 を接地入力に接続します。LEAD110 シリーズ電極リード線は、どの BIOPAC 使い捨て電極にも接続します。

SS1LA の仕様

ケーブル長： 3m
終端： 標準 1.5mm 雌型タッチプルーフコネクタ

注：SS1L は、旧型 2mm ピン接続用の 3m の電極アダプタです。2mm ピン接続をタッチプルーフ 1.5mm 接続に転換するには、CBL201 を使用します。